

キャリブレーションフリーな有機化合物の定量分析法


准教授・大平 慎一

大学院先端科学研究部 理学系 化学分野


▶ 研究内容

化学物質の濃度測定は 環境 生体 生産物などの試料に対し あらゆる場面でされている。機器による測定では 迅速かつ高感度な自動分析も達成されている。しかしながら 機器分析では 濃度既知の標準物質によるシグナルと試料から得られるシグナルの比較によって濃度が算出されており 高純度かつ安定な標準物質が入手できない場合 濃度を求めることができない。そこで 分離カラムで物質ごとに分けた後 化学的・物理的な手法で 有機化合物をCO₂に変換して定量する手法を開発した。本法では あらゆる有機化合物をNaHCO₃で作成した検量線により定量可能であった。すなわち 様々な有機化合物に対して 炭素含有量に基づく応答を示すことから 標準物質フリーな定量分析が可能であった。ホルマリン中ホルムアルデヒドの純度測定や 飲料物試料中の糖や有機酸の定量に適応可能であった。

ユニバーサルカーボン検出器の原理

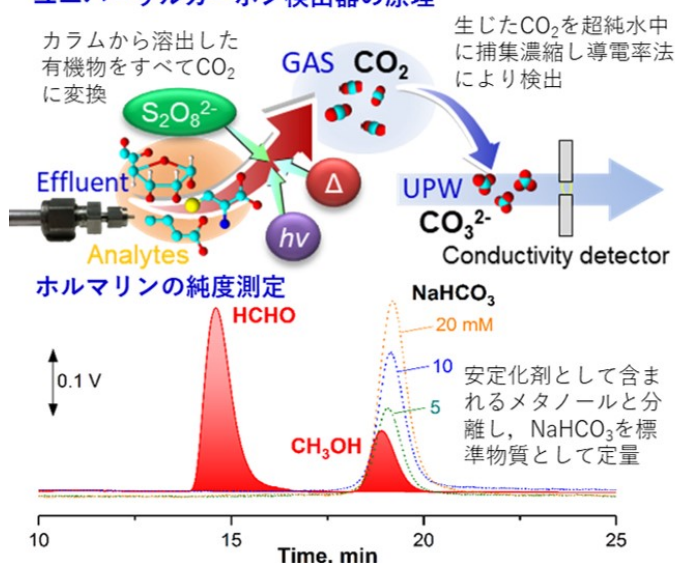

様々な物質による応答評価

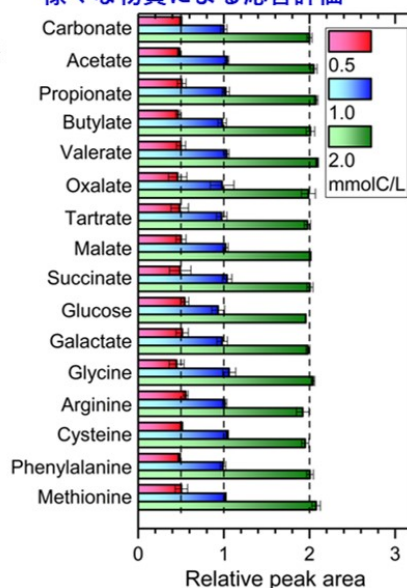

Ohira et al., Analytical Chemistry, 90, 6461 – 6467 (2018).

▶ 提供できる技術

有機化合物のキャリブレーションフリーな検出法 ・ 化学物質の純度測定 ・ 飲料物試料中糖 有機酸の分析法

▶ 応用分野等

標準物質の準備が難しい異性体や反応中間体の定量分析 高分子化合物の重合度の解析

▶ キーワード

液体クロマトグラフィー キャリブレーションフリー ユニバーサル検出器 有機化合物

《ご連絡先》 コーディネータ 合志 圭 TEL 096-342-3142 FAX:096-342-3142 mail:k-goshi@jimu.kumamoto-u.ac.jp